

Präzises Handling unter dem Mikroskop.
Der Pipettierhelfer micro-classic.



micro-classic

F I R S T C L A S S · B R A N D

Mikroskopieren erfordert höchste Konzentration. Deshalb sollte mit komfortablen und zuverlässigen Geräten gearbeitet werden.

Der Pipettierhelfer micro-classic bietet wegen seiner ergonomischen Form und einfachen Handhabung den Komfort, der für diese anstrengende Arbeit benötigt wird. Besonders im IVF-Labor erweist er sich als zuverlässiger Partner. Der micro-classic. Von BRAND.



micro-classic
sicher, leicht und handlich



micro-classic

Sicher, leicht und handlich.

- Einfache Handhabung, präzise Volumeneinstellung.
- Besonders geeignet für Arbeiten im IVF-Labor und im medizinischen Labor.
- Für Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z.B. Blutmischpipetten).
- Verringerung der Infektionsgefahr beim Umgang mit infektiösem Material.
- Adapter und Saugschlauch des micro-classic sind autoklavierbar bei 121 °C.

Einfach und sicher zu bedienen:

1. Pipette aufstecken
2. Medium aufnehmen
3. Medium abgeben

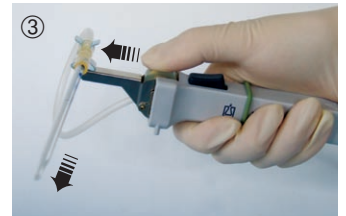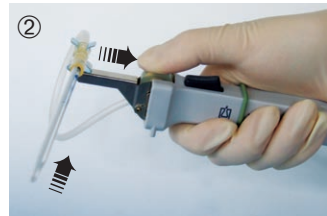

micro-classic Pipettierhelfer

mit 2 Ersatzschläuchen.
Verpackungseinheit 1 Stück.

Best.-Nr. 259 00

Ersatz-Adapter mit Saugschlauch

Verpackungseinheit 3 Stück.

Best.-Nr. 259 31



Einmal-Mikropipetten intraMARK

BLAUBRAND®, konformitätsbescheinigt, mit Ringmarke

DIN ISO 7550. Konformitätsbescheinigt ab 5 µl gemäß Eichordnung. Justiert auf 'In'.
Color-Code nach ISO für klare Identifizierung. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
Verp.-Einh. 1000 Stück (4 Dosen à 250 St.), 200 µl: Verp.-Einh. 800 Stück (4 Dosen à 200 St.).

Marke(n) bei µl	Color-Code	Länge mm	Richtigkeit ≤ ± %	Präzision ≤ %	Best.-Nr.
1/2/3/4/5*	weiß	125	0,30	0,6	7087 07
10	orange	125	0,25	0,5	7087 09
20	schwarz	125	0,25	0,5	7087 18
25	2 x weiß	125	0,25	0,5	7087 22
20 + 40	2 x rot	125	0,25	0,5	7087 28
40	2 x rot	125	0,25	0,5	7087 27
50	grün	125	0,25	0,5	7087 33
50 + 100	blau	125	0,25	0,5	7087 45
100	blau	125	0,25	0,5	7087 44
200	rot	125	0,25	0,5	7087 57

* konformitätsbescheinigt für Marke 5 µl

BRAND® und BLAUBRAND® sind eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

